

## Extensive Lines



### Device designation

- Polyvalent extensive line with male/male connector
- Pediatric extensive line with male/male connector
- Arterial extensive line with male/male connector

### Indications

Extensive lines are destined to be used as an extension of infusion devices for administration of fluids.

Single use device. Do not reuse. Do not re-sterilize.

Devices must be used only by trained personnel.

Medical personnel are responsible for cross contamination prevention and accomplishment of aseptic procedures to reduce the risk of contamination.

The device is a Luer connection and latex free.


The safety use of the extensive line is assured by the following protocol.

### Protocol

1. Open the package and remove the protection cap from the male connector side of the extensive line;
2. Connect the male connector to the terminal part of the infusion device to use;
3. Purge the devices and assure all the air is removed from the tubing;
4. Connect the male connector of the extension line to the needle or to the catheter to use on the patient;
6. Assure that all the connections are correctly executed and start the procedure;
7. When the procedure is finished, disconnect the extension line used;
8. Place the extensive line used into the hospital residuals recipient.

### Warnings!

- Device is not intended for reuse. Intended to be used once for a single patient.
- After use the devices must be treated as hospital waste.
- The manufacturer is not responsible for damages that may arise from the device misuse or for the non accomplishment of the Instructions for use.
- Defined storage conditions must be kept and assured.

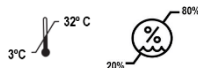

Use by date



Batch code



Catalogue number



Sterilized using ethylene oxide



Do not resterilize



Single use device



Manufactured by



Do not use if package is damaged



Keep away from sunlight



Keep dry



Consult instructions for use



Caution



Medical device



Non-pyrogenic

## Prolongadores



### Designação do dispositivo

- Prolongador polivalente com conetor macho/macho
- Prolongador pediátrico com conetor macho/macho
- Prolongador Arterial com conetor macho/macho

### Indicações

Os prolongadores destinam-se a ser utilizados como extensores dos sistemas de perfusão para administração de fluidos.

Dispositivo de uso único. Não reutilizar. Não reesterilizar.

Os dispositivos devem ser utilizados apenas por pessoal com formação.

O pessoal médico é responsável por prevenir a contaminação cruzada devendo cumprir procedimentos assépticos para reduzir o risco de contaminação.

Os produtos são conexões Luer e isentos de latex.


O uso seguro dos prolongadores é assegurado pelo protocolo descrito a seguir.

### Protocolo

1. Abrir a embalagem e retirar a tampa de proteção do lado do conetor macho do prolongador;
2. Conectar o conetor macho ao terminal do dispositivo de perfusão a utilizar;
3. Purgar o dispositivo e assegurar que todo o ar foi removido da tubagem;
4. Conectar o conetor macho do prolongador à agulha ou cateter a utilizar no paciente;
6. Assegurar que todas conexões estão corretamente efetuadas e iniciar o procedimento;
7. Finalizado o procedimento, desconectar o prolongador utilizado;
8. Colocar o prolongador utilizado no recipiente de resíduo hospitalar;

### Avisos!

- Os dispositivos não se destinam a ser reutilizados. Destinados a ser utilizados uma vez por paciente.
- Depois de utilizados os dispositivos devem ser tratados como resíduo hospitalar.
- O fabricante não se responsabiliza por danos resultantes do mau uso do produto e não cumprimento das instruções de utilização.
- Devem ser mantidas e asseguradas as condições de armazenamento definidas.

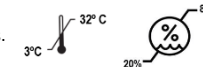

Validade



Lote



Referência



Esterilizado por óxido de etileno



Não reesterilizar



Dispositivo de uso único



Manufactured by



Não utilizar se a embalagem estiver danificada



Manter afastado da luz solar direta



Manter seco



Consultar as instruções de uso



Cuidado



Dispositivo médico



Non-pyrogenic